

# SAFE® gel diet water

Page 1/2

## Définition

Solution hydratante et nutritionnelle pour animaux.  
Avec 98 % d'eau, ce gel est utilisé pour fournir une source d'eau.  
Thermoréversible à 70-90 °C pour l'ajout de principe actif.

## Objectif Produit

Pour les périodes de stress: animaux affaiblis, postopératoire, transport, élevage, ...  
A utiliser dans le cadre de protocoles expérimentaux.  
Peut être distribué en complément de l'eau.



SAFE® gel diet water

Photo non contractuelle

## Mode d'emploi

### DISTRIBUTION

#### Période

En accord avec le projet et le bien être des animaux.  
Une adaptation préalable au gel est recommandée.

#### Méthode

- Ad libitum ou rationnée selon les protocoles expérimentaux.
- Placer le pot dans la cage, ou retirer le gel et le placer dans la mangeoire, le fond, sur son couvercle ou une boîte de Pétri.
- Eau potable et aliment à disposition si possible. Peut être portionné.

### CONSOMMATION JOURNALIERE

Varie selon l'espèce, le poids et l'âge.

### CONSERVATION

Conserver dans un endroit propre, sec, frais, à l'abri de la lumière.  
Conserver à 4 °C

### DUREE DE CONSERVATION à la date de production

12 mois dans l'emballage original.  
Après ouverture du pot, le gel peut être conservé 5 jours maximum.

## Présentation Produit

\* Sur demande, tous les aliments SAFE® sont disponibles conditionnés, ionisés et analysés.  
Sélection d'articles les plus vendus dans la gamme SAFE®.

ALIMENT	CONDITIONNEMENT STANDARD	GENERALEMENT DISPONIBLE AVEC LA DOSE D'IRRADIATION
SAFE® gel diet water*	60 x 100 g - 30 pots dans 2 poches plastiques	Min. 10 kGy

## Irradiation

Doses possibles: Minimum 10, 25 ou 40 kiloGrays.

## Présentation du Produit

GEL

# SAFE<sup>®</sup> gel diet water


## Ingrédients

Eau, hydrocolloïdes, conservateurs.

### COMPOSITION CENTESIMALE

Fourrages, Fibres	1.8 %
Autres	< 1 %
Eau	98.2 %

### COMPOSITION NUTRITIONELLE

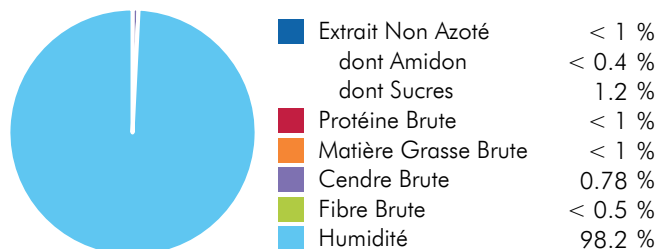

### VALEUR ENERGETIQUE

	MJ/kg	kcal/kg	%
EM Porc	0.21	49	
EM Atwater	0.17	41	
Energie via protéines		< 10	
Energie via lipides		< 10	
Energie via ENA	0.15	36	88.7

Plus d'information sur les calculs énergie: [www.safe-lab.com](http://www.safe-lab.com)

Pour le bien-être des animaux, la litière SAFE<sup>®</sup> et les enrichissements tels que les blocs à ronger SAFE<sup>®</sup> et les matériaux de nidification SAFE<sup>®</sup> doivent être disponibles dans la cage.

Les valeurs des produits finis sont données à titre indicatif et n'ont pas de valeur contractuelle. Il s'agit de moyennes calculées sur les résultats d'analyse du produit avant irradiation et autoclavage. En fonction des conditions de production, de stockage et des méthodes d'analyse, des variations peuvent survenir. Une analyse peut être effectuée sur demande.

Fabriqué en France